

# Bedienungsanleitung


**omegon**



**Omegon® Kreuztisch  
für  
Omegon® VisioStar 40x-400x**

Deutsche Version 05.2019 *Art.-Nr. 62506*

### Unterseite mit den Fixierstiften

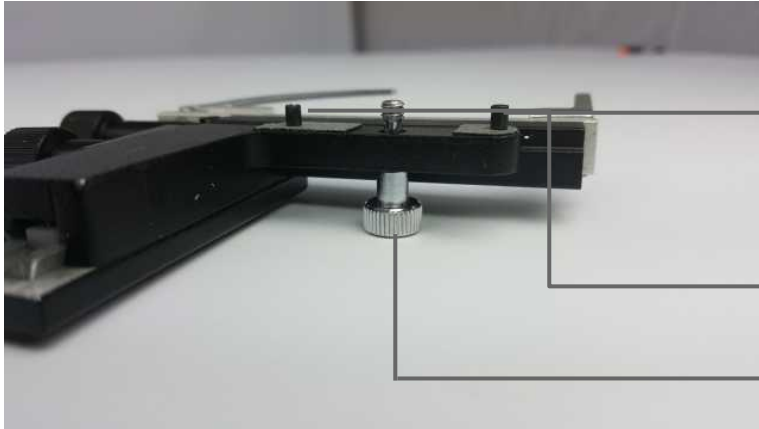

Fixierstifte für  
Objekttisch

Klemmschraube auf  
Objekttisch VisioStar

### Oberseite mit Feintrieben



Feintriebe in X + Y




Demontage der Klemmfedern  
mit Kreuzschlitz Schraubendreher



3 Bohrungen für Montage  
des Kreuztisches

Nach dem Abschrauben der beiden Klemmfedern kann der Kreuztisch aufgesetzt werden. Die drei exakt nebeneinander liegenden Bohrungen sind links und rechts für die Fixierstifte und die mittlere Bohrung für die Klemmschraube, welche mit der Hand gut angezogen werden muss, damit der Kreuztisch fest fixiert auf dem Objektisch des VisioStar sitzt.

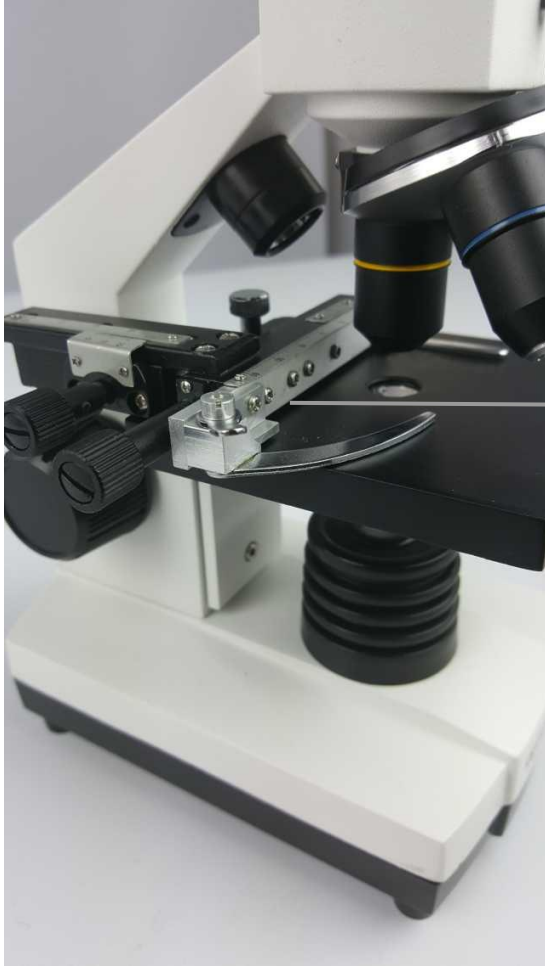

Montierter Kreuztisch

© nimax GmbH 2019